



CORSE DE PROVIDENCE

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL CORSÉ DE PROVIDENCE

Corsé de uso nocturno para la corrección de la escoliosis, basado en la corrección de las deformidades mediante fuerzas de compresión en tres o cuatro puntos según sea la desviación. No provoca la aparición de curvas secundarias, mejorando el resultado del tratamiento.

Permite el desarrollo natural de la pelvis, ya que no limita su crecimiento porque no hay fuerzas actuantes sobre la misma. No requiere nivelación pélvica durante el uso del corsé.

Para el diseño y fabricación del corsé no se toma molde del paciente, sino que se toman una serie de medidas en la Mesa de Medición especial de Providence.

El diseño del corsé se realiza mediante diseño asistido por ordenador (CAD). La fabricación del molde y la posterior del módulo del corsé también vienen asistidos por ordenador (CAM). El diseño y fabricación requieren de software específico para este corsé propiedad de Spinal.

El diseño asistido por ordenador del corsé permite realizar el efecto desrotador del mismo de hasta 25°.

Debido al diseño del corsé y a su poco volumen, el corsé resulta fácil de usar, a la vez que cómodo para el paciente, siendo esto decisivo para el tratamiento.

El corsé solo puede ser suministrado por aquellas empresas que hallan recibido formación y que posean la Mesa de Medición especial de Providence. Las empresas recibirán un certificado a tal efecto.

El corsé irá siempre acompañado del correspondiente certificado de autenticidad.


CORSÉ PROVIDENCE: TORACOLUMBAR



ORTOPRONO


**Providence Scoliosis
Measuring Board**

Chart **A**

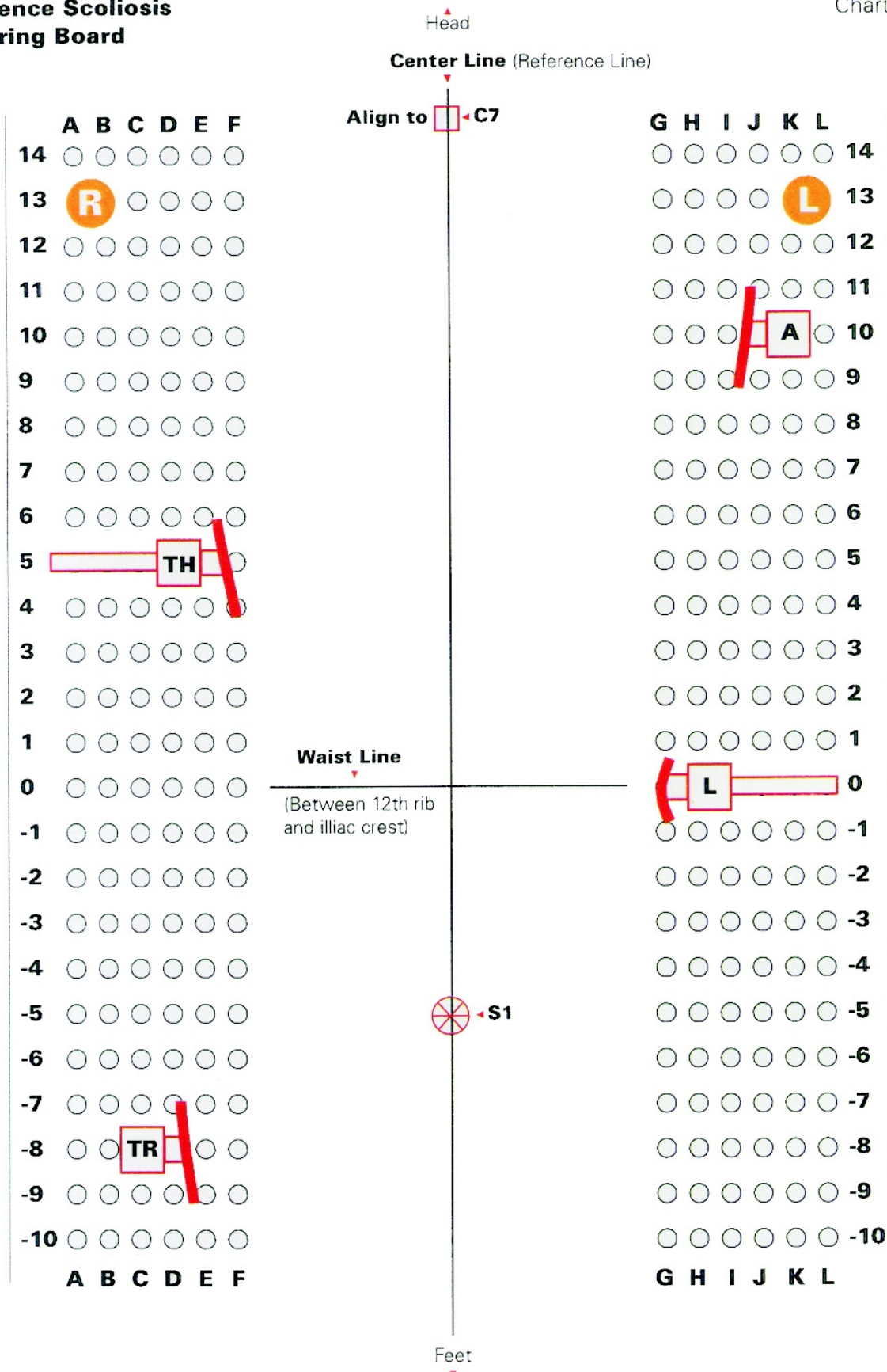


Left Lumbar Curve
Apex from L-2 or L-4

Chart B

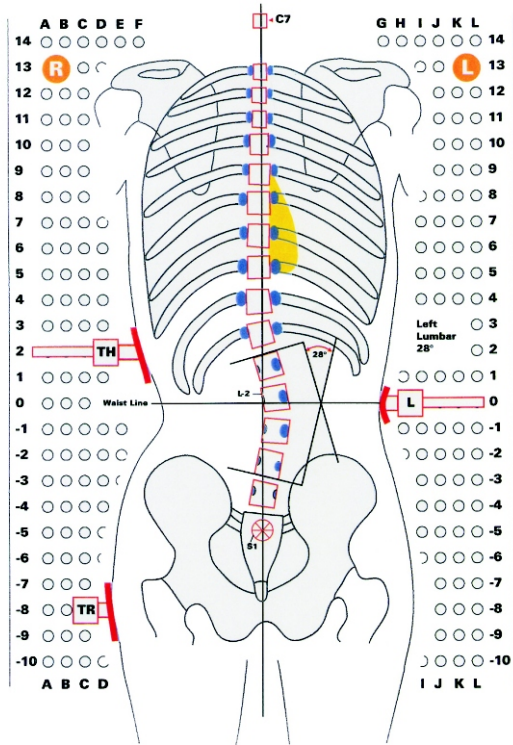


Providence
Left Lumbar Brace

Chart C

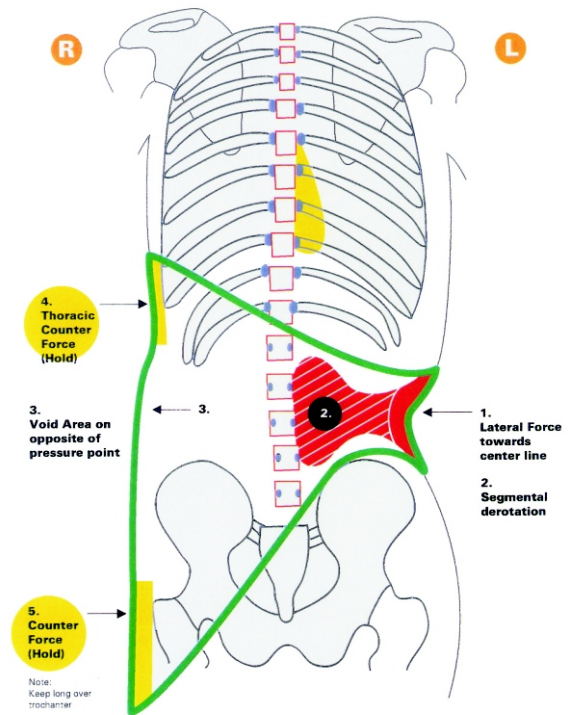


Left Thoracolumbar Curve
Apex L-1 or T-12

Chart D

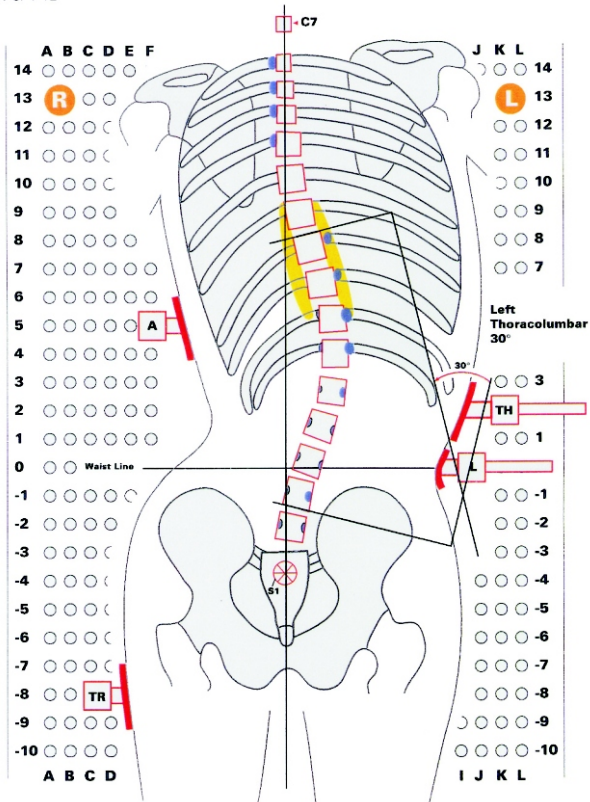


Providence
Left Thoracolumbar Brace

Chart E

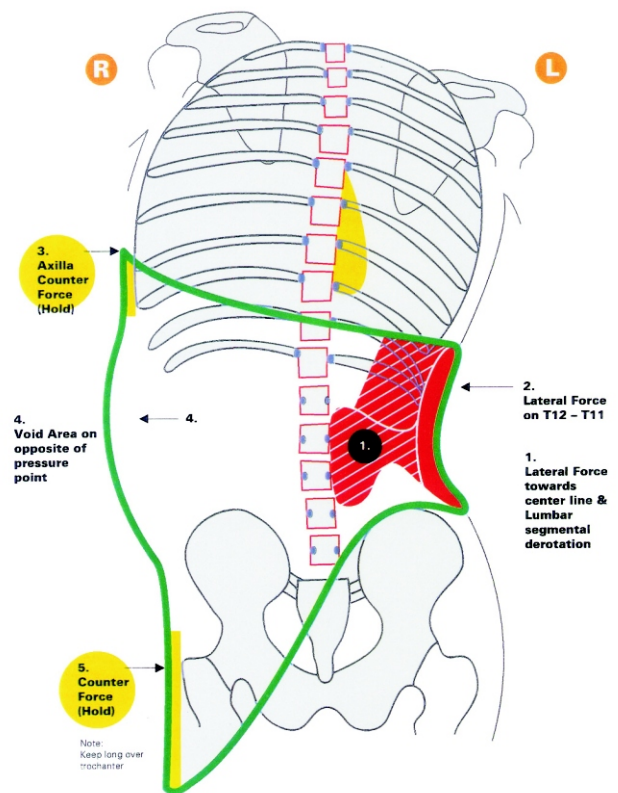


Left Lumbar, Right Thoracic Double Curve
Apex in both Lumbar & Thoracic Spine

Chart F

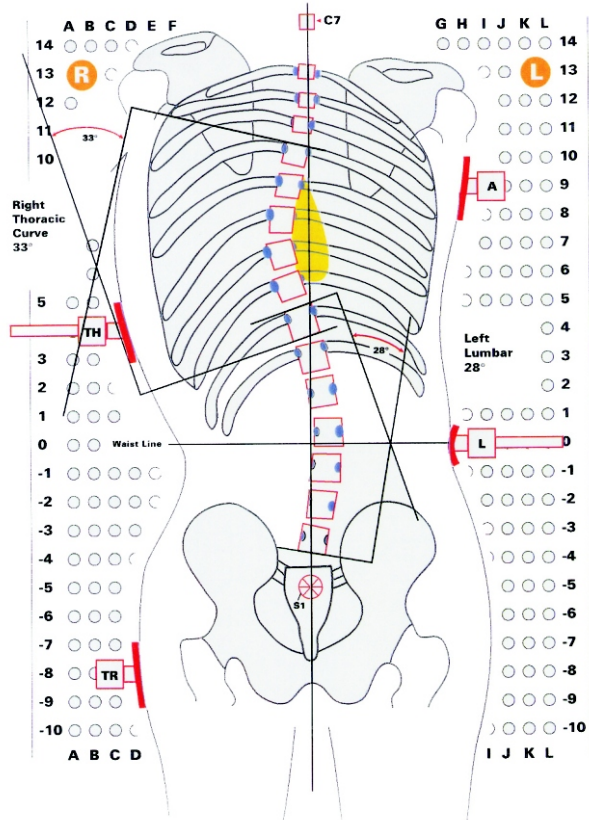


Providence
Left Lumbar, Right Thoracic Double Curve Brace

Chart G

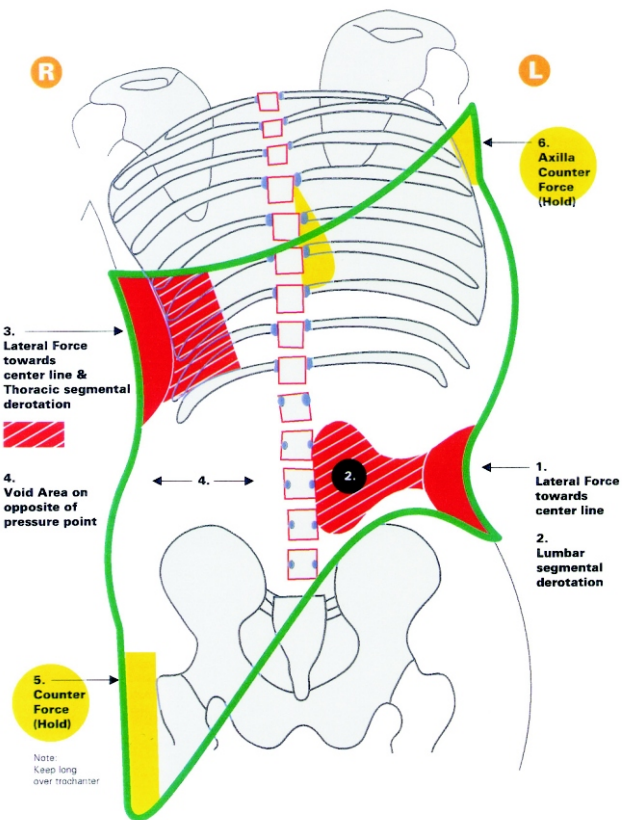

Providence
Curva torácica derecha

Chart H

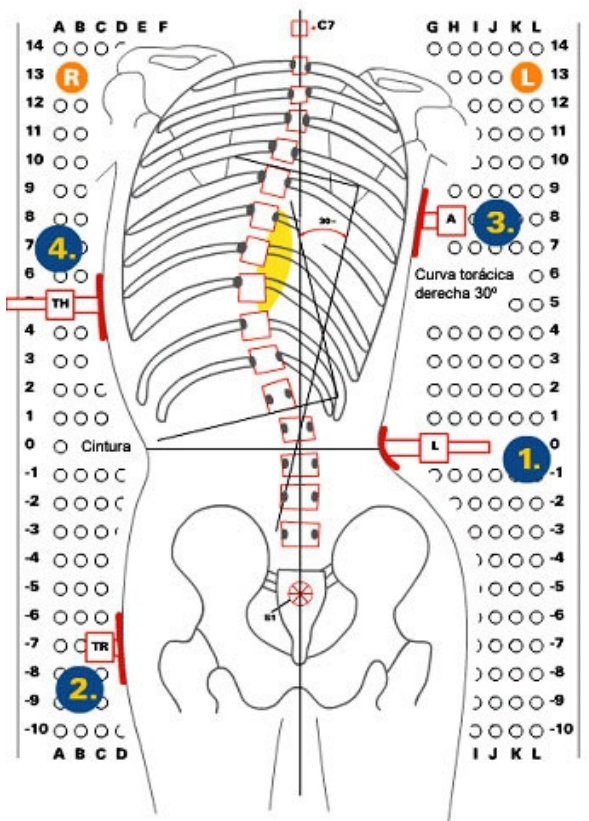

Providence
Curva torácica derecha

Chart I

