

Ortesis OCSI NEUROFLEX

DynaPro™



AirPro™



SoftPro™




OrthoPro™



**ORTESIS PARA
EL TRATAMIENTO
DINÁMICO Y PROGRESIVO
DEL MOVIMIENTO ARTICULAR**

ORTOPRONO

Ortesis diseñadas para el tratamiento progresivo de la contractura y la reducción de espasticidad que producen un rango de fuerzas con el fin de controlar el nivel de tensión muscular logrando un estiramiento prolongado, adecuado a la patología, sin alcanzar el límite de rechazo de la ortesis.

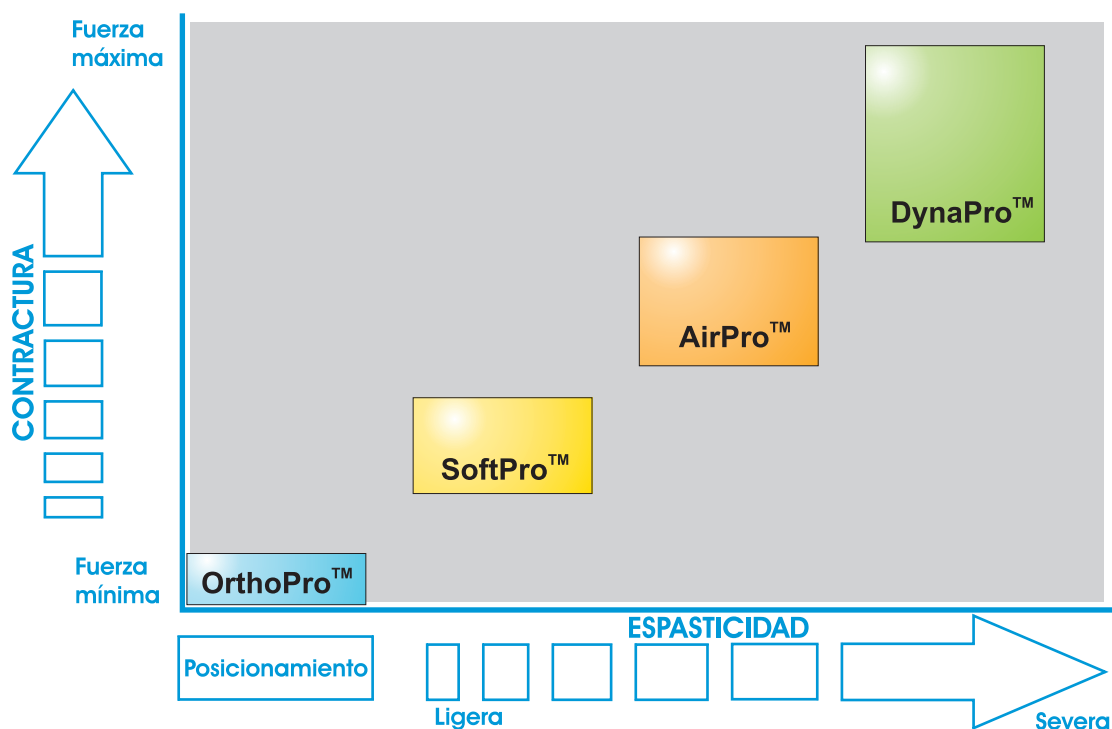

OrthoPro™		
INDICACIONES	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Estabilización y mantenimiento de las articulaciones.	Fabricadas en termoplástico.	Protección eficaz de las articulaciones.
Afecciones cutáneas.	Forro acolchado, antibacteriano, transpirable y de gran resistencia.	Protección de la piel.
Fascitis plantar.		

AirPro™		
INDICACIONES	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Contracturas ligeras o moderadas.	Fabricadas en termoplástico maleable manualmente.	Tratamiento progresivo de las contracturas.
Contracturas metacarpofalángicas e interfalángicas moderadas o severas.	Cámaras de aire para la extensión gradual de las articulaciones.	Regulación de la extensión de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas mediante aire.
Espasticidad moderada.	Forro acolchado, antibacteriano, transpirable y de gran resistencia.	Disminución de las espasticidad.
Afecciones cutáneas.		Mantenimiento de la rehabilitación de las articulaciones.
		Protección de la piel.

SoftPro™		
INDICACIONES	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Dolor articular.	Fabricadas en termoplástico maleable manualmente.	Disminución del dolor articular.
Contracturas ligeras o moderadas.	Forro acolchado, antibacteriano, transpirable y de gran resistencia.	Mantenimiento activo del posicionamiento articular.
Espasticidad ligera.		Protección de la piel.
Afecciones cutáneas.		

DynaPro™		
INDICACIONES	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Contracturas moderadas o severas.	Fabricadas en termoplástico moldeable mediante calor.	Tratamiento progresivo de las contracturas.
Espasticidad moderada o severa.	Forro acolchado, antibacteriano, transpirable y de gran resistencia.	Disminución de la espasticidad.
Afecciones cutáneas		Mantenimiento de la rehabilitación de las articulaciones.
		Protección de la piel.



Ortesis WHF SoftPro GRIP

- Indicada para el tratamiento de las contracturas ligeras a moderadas de muñeca mano y dedos.
- El rodillo palmar se adapta cómodamente a la mano en puño.
- Incluye dos rodillos de diferente tamaño para incrementar gradualmente la extensión de las articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas.
- Tallas: P, M, G.
- Tallas pediátricas: Niño, Cadete.

Ref. OP A10 542



Ortesis WHF SoftPro FUNCIONAL

- Indicada para el tratamiento de contracturas ligeras a moderadas en muñeca, mano, dedos.
- La cincha de muñeca extra-larga mantiene la muñeca en la posición correcta y aplica un apropiado estiramiento.
- Mantiene, posiciona y/o corrige la alineación del pulgar.
- Tallas: P, M, G.
- Tallas pediátricas: Niño, Cadete.

Ref. OP A10 438



Ortesis WHF SoftPro PALMAR

- Indicada para el tratamiento de la aducción severa del pulgar.
- El pulgar se posiciona bajo la plataforma de los dedos como paso previo a la abducción del pulgar.
- La larga plataforma de dedos proporciona cómodo descanso y protección a mano y dedos.
- Tallas: P, M, G.

Ref. OP A10 532



Ortesis WHF SoftPro DORSAL

- Indicada para el posicionamiento funcional de la muñeca, especialmente cuando ésta tiende a la pronación.
- Proporciona fuerza en tres puntos para incrementar la extensión dorsal de la muñeca.
- Mantiene, posiciona y/o corrige la alineación del pulgar.
- Tallas: P, M, G.

Ref. OP A10 533



Ortesis WHF SoftPro CHAMP

- Indicada para el tratamiento de contracturas ligeras a moderadas en muñeca, mano y dedos.
- Mantiene la muñeca, mano y dedos en posición funcional.
- El sistema de cinchas proporciona un soporte óptimo.
- Mantiene, posiciona y/o corrige la alineación del pulgar.
- Tallas: XP, P, M, G.

Ref. OP A10 503



Ortesis WHF AirPro

- Indicada para contracturas de dedos severas.
- Adaptable a la forma de la mano para acomodarse a diferentes grados de contractura de los dedos.
- Incluye una cámara de aire palmar con forma de cono que puede utilizarse independientemente del resto de la ortesis.
- Talla: Única.

Ref. OP A10 510



Ortesis WHF DynaPro REPOSO

- Indicada para el tratamiento de la flexión moderada a severa, y espasticidad en muñeca, mano y dedos.
- Diseñada para el descanso de la mano, con plataforma de dedos rígida.
- Trata la abducción del pulgar mediante un soporte con dos aditamentos de gel sujetos por una cincha.
- La muñeca flexible minimiza los episodios de espasticidad.
- Mantiene la alineación funcional de la mano.
- Tallas: P, M, G.

Ref. OP A10 536



Ortesis WH DynaPro FLEXIÓN MANO

- Indicada para el tratamiento de la flexión moderada a severa y la espasticidad en muñeca mano y dedos.
- Incluye dos rodillos de diferente tamaño para incrementar gradualmente la extensión de las articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas.
- Proporciona corrección de la desviación cubital.
- Tallas: Única.
- Tallas pediátricas: Niño, Cadete.

Ref. OP A10 534



Ortesis WHF DynaPro FLEXIÓN DEDOS

- Indicada para el tratamiento de la flexión moderada a severa, y espasticidad en muñeca, mano y dedos.
- Diseñada para el descanso de la mano, con plataforma de dedos flexible.
- Muñeca, articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas flexibles.
- Trata la abducción del pulgar mediante un soporte con dos aditamentos de gel sujetos por una cincha.
- Incluye separador de dedos.
- Tallas: P, M, G.
- Tallas pediátricas: Niño, Cadete.

Ref. OP A10 535

Separador de dedos



- Proporciona separación de dedos y ligera abducción.
- Protege la integridad de la piel de los dedos.

Ref. OP A10 537

Separador y extensor de dedos



- Mantiene cómodamente los dedos separados en posición neutra.
- Proporciona fuerza en tres puntos para alinear las articulaciones interfalángicas.
- Protege la integridad de la piel de los dedos.

Ref. OP A10 538



Ortesis de codo OrthoPro

- Control de movimiento proporcionado por la articulación KWIK-SET.
- Regulación sencilla de la articulación sin quitar la ortesis de codo.
- Regulación de la articulación a cualquier grado de flexión y/o extensión.
- Ejercitador ROM disponible.
- Tallas: P, M, G.

Ref. OP A10 511



Ortesis de codo DynaPro

- Indicada para el tratamiento de la flexión moderada a severa del codo, y/o espasticidad.
- El diseño específico de la articulación de codo proporciona asistencia a la rehabilitación.
- Articulación con goniómetro incorporado para facilitar su adaptación.
- Tallas: P, M, G.
- Tallas pediátricas: Niño, Cadete.

Ref. OP A10 539



Ortesis de codo SoftPro

- Indicada para el tratamiento de contracturas ligeras a moderadas de codo.
- Mantiene, protege y posiciona la articulación del codo.
- Proporciona una extensión progresiva que produce el estiramiento terapéutico deseado.
- Regulación sencilla de la articulación.
- Proporciona fuerza en tres puntos para producir el estiramiento progresivo.
- Ejercitador ROM disponible.
- Tallas: P, M, G.
- Tallas pediátricas: Niño, Cadete.

Ref. OP A10 541



Ortesis de rodilla SoftPro

- Indicada para el acortamiento de los tejidos de la rodilla en paciente no deambulantes.
- Articulación de rodilla fácilmente ajustable.
- Disponible opcionalmente una rodillera de gel.
- Tallas: P, M, G.
- Tallas pediátricas: Niño, Cadete.

Ref. OP A20 706



Ortesis de rodilla AirPro COKO

- Indicada para el tratamiento de contracturas en flexión moderadas a severas de rodilla y/o espasticidad.
- Favorece el tratamiento de los acortamientos de los tejidos de la rodilla.
- Las cámaras de aire producen el tratamiento de las contracturas.
- Articulación de rodilla KWIK-SET para el control de la articulación removible.
- Tallas: P, M, G.

Ref. OP A20 750



Ortesis de rodilla DynaPro

- Indicada para el tratamiento de contracturas en flexión moderadas a severas de rodilla y/o espasticidad.
- Proporciona estiramiento dinámico y prolongado de baja carga.
- Incluye rodillera de gel.
- Tallas: P, M, G.
- Tallas pediátricas: Niño, Cadete.

Ref. OP A20 751



Ortesis de rodilla OrthoPro HYPEREX

- Indicada para el control efectivo de la hiperextensión de rodilla y el Genu Recurvatum.
- La cámara de aire incorporada al brazalete posterior controla la hiperextensión, reduce la fuerza ejercida sobre la rodilla y consigue un alto nivel de comodidad para el usuario.
- Ligera y fácil de colocar.
- Tallas: P, M, G, XG.

Ref.OP A20 829



Ortesis de rodilla REHABILITATOR

- Indicada para personas con lesiones en las rodillas -crónicas o postoperatorias- y situaciones de inestabilidad.
- Descarga y estabiliza la rodilla.
- Ayuda a reestablecer un patrón de marcha normal.
- Mejora el proceso de rehabilitación de la rodilla.
- Evita la atrofia muscular y aumenta con el uso la masa muscular.
- **Reduce el dolor y proporciona mejoría funcional en usuarios que están en el grado 3 ó 4 de una osteoartritis de rodilla.**

CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO:

- El sistema de cámaras neumáticas descarga la articulación de la rodilla reduciendo el dolor y la inflamación, además proporciona un apoyo excepcional.
- El doble sistema dinámico SWING ASSIST ayuda al cuádriceps en la fase de impulso inicial de extensión de la rodilla.
- La articulación policéntrica ROM permite un control preciso de la extensión o flexión si es necesario.
- Diseño dinámico y adaptable de perfil bajo que impide que se desplace la ortesis.
- Tallas: XP, P, M, G, XG, XXG.

Ref. OP A20 847



AFO OrthoPro NOCTURNO PASIVO

- Indicado para el tratamiento nocturno de la fascitis plantar.
- Cinchas elásticas para el correcto tratamiento de la flexión plantar, inversión y eversión.
- Suela antideslizante para transferencias asistidas.
- Tallas: P, M, G.

Ref. OP A20 711



AFO OrthoPro NOCTURNO ACTIVO

- Indicado para el tratamiento nocturno de las fascitis plantar.
- Las cinchas elásticas ajustables proporcionan un óptimo tratamiento de la dorsiflexión.
- Suela antideslizante para transferencias asistidas.
- Incluye cuña para dedos.
- Tallas: P, M, G.

Ref. OP A20 712



AFO SoftPro ESTÁTICO

- Indicado para el tratamiento de la flexión plantar.
- Suela antideslizante para transferencias asistidas.
- Tallas: P, M, G y XG.
- Tallas pediátricas: Niño, Cadete.

Ref. OP A20 749



AFO SoftPro DEAMBULATORIO

- Indicado para el tratamiento de la flexión plantar.
- Suela antideslizante para transferencias asistidas.
- El diseño de la base facilita el inicio de la marcha.
- Tallas : P, M, G.

Ref. OP A20 609



AFO DynaPro

- Indicado para el tratamiento de las contracturas de tobillo y pie.
- Cinchas elásticas para el correcto tratamiento de la flexión plantar, inversión y evasión.
- Suela antideslizante para transferencias asistidas.
- Tallas: P, M, G.
- Tallas pediátricas: Niño, Cadete.

Ref. OP A20 752



Ortesis de hombro OrthoPro

- Indicada para proporcionar apoyo, protección, estabilización de hombro y soporte de humero.
- Tallas: P, M, G.

Ref. OP A10 540



Ortesis de cadera SoftPro

- Indicada para el control bilateral de la abducción de la cadera.
- La barra telescópica permite una abducción de hasta 45°.
- Uso en cama o en silla de ruedas.
- Tallas: G, XG.

Ref. OP A20 709



Ortesis de cadera AIRE

- Indicada para el control bilateral de la abducción de la cadera.
- La cámara de aire proporciona 20° de abducción máxima.
- Tallas: G, XG.
- Talla pediátrica: Única.

Ref. OP **A20 708 (pediátrica)**
A20 710 (adulto)



Ortesis DynaPro TORTÍCOLIS

- Indicada para el tratamiento de la flexión lateral de la columna cervical de naturaleza funcional (no estructurada).
- Mejora la amplitud de movimiento y la alineación funcional de la cabeza y cuello.
- Reduce la flexión cervical debido al tono anormal y la espasticidad.
- Apoya la musculatura débil para ayudar en el alineamiento funcional de la cabeza y cuello.
- Mejora la capacidad del usuario en la deglución.
- Tallas: Única.
- Tallas pediátricas: Niño, Cadete.

Ref. OP A30 512

SELECTOR DE ORTESIS DE OCSI NEUROFLEX

Estado Clínico/Problema	Objetivo terapéutico	Selección de Ortesis/Terapia	Directrices de adaptación
Dolor AR, inflamación, deformidad, dolor, RSD, con movimiento o estiramiento.	Apoyo/Protección/Posicionamiento	Ortesis Softpro Adaptación estática para apoyo y posicionamiento.	Adaptación de contacto total en el límite de comodidad.
Dolor post cirugía/lesión con movimiento.	Control del movimiento articular Limitar/controlar el movimiento articular	Ortesis de rodilla y codo OrthoPro Apoyo a la articulación durante el movimiento.	Fijar la articulación para limitar el movimiento según tolerancia.
Acourtamiento de tejidos-ono bajo a medio. Escasa perceptibilidad. Poca integridad cutánea.	Mantenimiento del rango de movimiento. Maximizar comodidad y protección cutánea	Ortesis Softpro Adaptación estática para apoyo y posicionamiento.	Límite máximo de comodidad.
Acourtamiento de tejidos-bajo a medio tono. Perceptibilidad aceptable.	Terapia conservadora de estiramiento. Restablecer rango de movimiento	Ortesis SoftPro Terapia de extensión progresiva.	Fijar el aparato para 5° a 8° de avance. Utilizar las cinchas de la ortesis para lograr presión en tres puntos.
Acourtamiento de tejidos-bajo a medio tono. Perceptibilidad aceptable o buena.	Estiramiento prolongado mediante presión de aire a baja carga. Restablecer rango de movimiento	Ortesis AirPro Estiramiento mediante cámara inflable. Estiramiento prolongado suave de baja carga.	Inflar la/s cámara/s para conseguir un suave estiramiento; palpar la articulación para evaluar la adaptación.
Acourtamiento de tejidos-ono de medio a alto con perceptibilidad de aceptable a buena.	Estiramiento dinámico prolongado de baja carga. Restablecer rango de movimiento	Ortesis DynaPro Terapia de flexión dinámica. Estiramiento dinámico prolongado de baja carga.	Fijar el aparato con 5° a 15° de avance para proporcionar el óptimo estiramiento prolongado de baja carga,
Hipertonidad neurológica-espasticidad. Control de contractura neurológica.	Control de la hipertonidad/espasticidad. Proporcionar estiramiento en el tejido contracturado	Ortesis DynaPro Neuro-inhibición de tensión. Tensión dinámica negativa no lineal.	Fijar el aparato con 5° a 15° de avance para inhibir la/s articulación/es para conseguir estiramiento prolongado en baja carga.

Acourtamiento del Tejido Adaptativo: Por falta de uso a lo largo del tiempo los tejidos conectivos, tendones y músculos se adaptan por la falta de uso a lo largo del tiempo mediante la retracción y pérdida de elasticidad limitando el movimiento articular (contractura).

Máximo de Perceptibilidad: Evaluación relativa de la calidad viscoelástica del tejido conectivo, tendones y músculos tal y como es percibida por el técnico en el límite disponible de rango de movimiento articular.

Tono: Término común de "hipertonidad" que es un aumento involuntario en los reflejos tendinosos que suponen hipersensibilidad y oposición al estiramiento terapéutico.

ROM: Siglas en Inglés de Rango de Movimiento (Range of Motion) ejercido por la articulación

Espasticidad: Reflejo exagerado del tendón profundo o espasmos musculares generalmente debidos a lesiones en las neuronas motoras superiores (Cerebro).

Extensión Progresiva: Tipo de terapia por la que mediante la ortesis apropiada se aplica estiramiento suave en tejidos encogidos mas alla del límite máximo. La ortesis puede ir modificandose de forma "progresiva" manteniendo el estiramiento y alargando los tejidos de forma progresiva.

Tensión neuro-inhibidora: Tensión muscular terapéutica por debajo del umbral de estiramiento reflejo, que obtenida mediante ortesis, permite iniciar la inhibición muscular aportando estiramiento terapéutico relajado.

Tensión dinámica negativa no lineal: Estiramiento dinámico por debajo del umbral de estiramiento reflejo que aplicado mediante ortesis sobre la articulación afectada, produce o reduce la tensión resultante por la contracción muscular dinámica.

Presión en tres puntos: Son los puntos de apalancamiento en los extremos proximal y distal de una ortesis que ejerce presión en una determinada dirección (por ejemplo hacia abajo) y que junto con otro punto regulable, contenido en la propia ortesis y ejercido en el ápex de la articulación en dirección opuesta (hacia arriba), ejerce un estiramiento terapéutico de la articulación (por ejemplo flexión inversa del codo).

AR: Artritis reumatoide.

RSD: Reflejo Distrofico Simpático

TABLA DE MEDIDAS DE LAS ORTESIS OCSI NEUROFLEX

(Medida: cm)


ORTESIS DE MUÑECA, MANO Y DEDOS

		A	B	Longitud ortesis*
		Ancho muñeca	Muñeca-dedo corazón	
Ortesis WHF SoftPro GRIP(Ref. A10 542) *	NIÑO*	<4,5	<10	21
Ortesis WHF SoftPro FUNCIONAL (Ref. A10 438) *	CADETE*	4,5 - 6,5	10 - 12,5	26
Ortesis WHF SoftPro PALMAR (Ref. A10 532)	PEQUEÑA	6,5 - 7,5	12,5 - 15	
Ortesis WHF SoftPro DORSAL (Ref. A10 533)	MEDIANA	7,5 - 9	15 - 20	
Ortesis WHF SoftPro CHAMP (Ref. A10 503)	GRANDE	>9	>20	
Ortesis WHF DynaPro Reposo (Ref. A10 536)				
Ortesis WHF DynaPro Flexión Dedos (Ref. A10 535) *				

NOTA: indicar derecha o izquierda

		A	B
		Ancho muñeca	Muñeca-dedo corazón
Ortesis WHF AirPro (Ref. A10 510)	STANDARD	7,5 - 9	15 - 20
Ortesis WHF DynaPro Flexión Mano (Ref. A10 534)			

NOTA: indicar derecha o izquierda

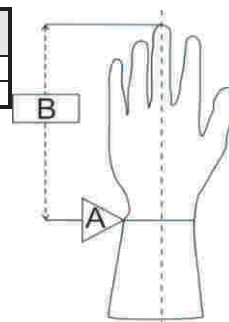


ORTESIS DE CODO

		C	D
		Perímetro brazo	Perímetro antebrazo
Ortesis de CODO OrthoPro (Ref. A10 511)	PEQUEÑA	20,3 - 25,4	16,5 - 20,3
	MEDIANA	25,4 - 30,5	20,3 - 25,4
	GRANDE	30,5 - 35,6	25,4 - 30,5

		C	D	Longitud ortesis*
		Perímetro brazo	Perímetro antebrazo	
Ortesis de CODO SoftPro (Ref. A10 541)	NIÑO	13 - 18		21,5
	CADETE	18 - 25,4		24
	PEQUEÑA	20,3 - 25,4	16,5 - 20,3	
	MEDIANA	25,4 - 30,5	20,3 - 25,4	
	GRANDE	30,5 - 35,6	25,4 - 30,5	

		C	D	Longitud ortesis*
		Perímetro brazo	Perímetro antebrazo	
Ortesis de CODO DynaPro (Ref. A10 539)	NIÑO	13 - 18		21,5
	CADETE	18 - 25,4		24
	PEQUEÑA	20,3 - 25,4	12,7 - 20,3	
	MEDIANA	22,9 - 29,2	19 - 25,4	
	GRANDE	28 - 35,6	22,9 - 29,2	

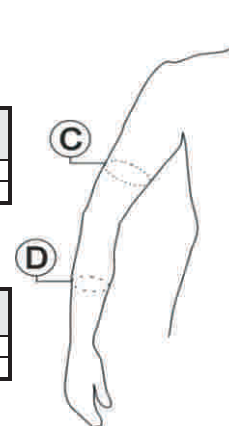

ORTESIS DE RODILLA

		E	F	Longitud ortesis*
		Perímetro muslo*	Perímetro gemelos**	
Ortesis de RODILLA SoftPro (Ref. A20 706)	NIÑO	25,5 - 30,5		26
	CADETE	30,5 - 35,5		32
	PEQUEÑA	30,5 - 38	18 - 25,4	
	MEDIANA	38 - 48,3	25,4 - 33	
	GRANDE	48,3 - 53,3	33 - 40,6	

		E	F
		Perímetro muslo*	Perímetro gemelos**
Ortesis de RODILLA AirPro COKO (Ref. A20 750)	PEQUEÑA	30,5 - 38	20,3 - 28
	MEDIANA	38 - 45,7	30,5 - 38
	GRANDE	45,7 - 56	38 - 48,3

		E	F	Longitud ortesis*
		Perímetro muslo*	Perímetro gemelos**	
Ortesis de RODILLA DynaPro (Ref. A20 751)	NIÑO	25,5 - 30,5		26
	CADETE	30,5 - 35,5		32
	PEQUEÑA	28 - 38	25,4 - 33	
	MEDIANA	38 - 48,3	30,5 - 38	
	GRANDE	48,3 - 53,3	35,6 - 45,7	

		E
		Perímetro muslo*
Ortesis de rodilla OrthoPro HYPEREX (Ref. A20 829)	PEQUEÑA	25-36
	MEDIANA	36-51
	GRANDE	51-69
	XGRANDE	69-81
NOTA: indicar derecha o izquierda		


		E	F
		Perímetro muslo*	Perímetro gemelos**
Ortesis de RODILLA REHABILITATOR (Ref. A20 847)	XPEQUEÑA	33 - 40,7	23 - 30,5
	PEQUEÑA	40,7 - 48,3	30,5 - 38,1
	MEDIANA	48,3 - 55,9	35,6 - 43,2
	GRANDE	53,3 - 63,5	40,7 - 50,8
	XGRANDE	61 - 71,1	48,3 - 58,4
	XXGRANDE	68,6 - 81,3	55,9 - 66
NOTA: indicar derecha o izquierda			

*Perímetro muslo: medir 11cm por encima del centro de la rodilla.

**Perímetro gemelos: medir 11cm por debajo del centro de la rodilla.

Nota: Las referencias marcadas con una * disponen también de ortesis para niño y cadete.

Longitud ortesis * = sólo en tallas infantiles

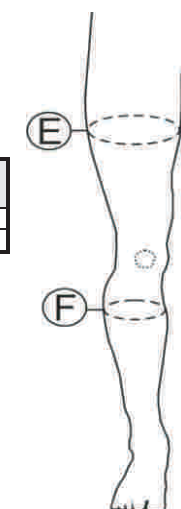

(Medida: cm)

ORTESIS DE TOBILLO-PIE

		Pie señora	Pie caballero
AFO OrthoPro NOCTURNO PASIVO (Ref. A20 711)	PEQUEÑA	35 - 39	35 - 37
AFO OrthoPro NOCTURNO ACTIVO (Ref. A20 712)	MEDIANA	39 - 42	37 - 42
	GRANDE	>42	42 - 45

		Pie	Perímetro gemelos (G)
AFO SoftPro ESTATICO (Ref. A20 749)*	NIÑO*	<34	28 - 33
AFO SoftPro DEAMBULATORIO (Ref. A20 609)	CADETE*	34 - 37	33 - 38
AFO DynaPro (Ref. A20 752)	PEQUEÑA	37 - 40	38
	MEDIANA	40 - 42	43
	GRANDE	42 - 44	48,2
	EXTRA-G	>44	58,4




OTRAS ORTESIS

		Perímetro H
Ortesis de HOMBRO OrthoPro (Ref. A10540)	PEQUEÑA	<28
	MEDIANA	28 - 38
	GRANDE	38

		Perímetro muslo (a 10cm de rodilla)
Ortesis de CADERA SoftPro (Ref. A20 709)	NIÑO *	<30,5
Ortesis de CADERA AIRE ADULTO (Ref. A20 710)	STANDARD	30,5 - 45,7
Ortesis de CADERA AIRE PEDIÁTRICO (Ref. A20 708)*	EXTRA-G	48,3 - 68,6

		Altura de frente a hombro
Ortesis DynaPro TORTÍCOLIS (Ref. A30 512)*	NIÑO*	7,62 - 12,70
	CADETE*	12,70 - 15,24
	MEDIANA	15,24 - 17,78
	GRANDE	17,78 - 22,86

NOTA: indicar derecha o izquierda

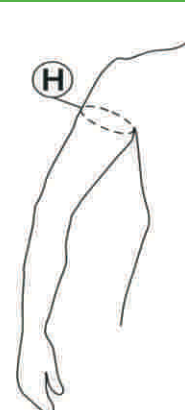

Nota: Las referencias marcadas con una * disponen también de ortesis para niño y cadete.
Longitud ortesis * = sólo en tallas infantiles.